

启动界面

新建项目

项目编号

下拉框可以选择项目

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

主页logo

样本管理  
员界面

细化信息?

新建项目

项目编号

单位/部门  
信息

临床样本

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

申办者	临床机构/部门	检测单位/部门	运输单位/部门
XXX有限公司 输入	临床部茶陵路3楼	小分子组茶陵路1楼	生生物流

点击具体单元格进行编辑  
点击编辑按钮全部可编辑?

保存

编辑

新建项目

项目编号

单位/部门  
信息

临床样本

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

周期/组别	检测类型	正份 (套)	备份 (套)	用途	运输方式	状态	特殊事项
A	PK	a1	b1	首次检测	干冰	冰冻	溶血
B	ADA	a2	b2	重测			脂血
C	Nab			ISR			
D	IR						
E	CT						

保存

编辑

新建项目

项目编号

单位/部门  
信息

临床样本

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

检测类型	代码	特殊事项		
STB	L			
QC	M			
	H			
	D			
	P			

保存

编辑

样本管理  
员界面

新建项目

项目编号

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

申办者	XXX有限公司
申办者项目编号	L75283CHH004（输入）
临床试验研究室项目编号	CRC-L2501（输入）

序号	临床机构/部门
01	XXX
02	XXX
03	XXX

保存

编辑

下拉框

新建项目

CRC-L2501

临床样本  
编号规则

生成临床  
样本编号

查看临床  
样本编号

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

样本编号规则:

L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1

A 申办者项目编号/临床试验研究室项目编号①/ ②

B 临床机构编号③

C 受试者编号④

D 检测类型⑤

E 采血序号/时间⑥/ ⑦

F 周期/组别⑧

G 正份备份⑨

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

下拉框选择①- ⑨的内容  
如未选择，则不显示

保存

编辑

新建项目

CRC-L2501

临床样本  
编号规则

生成临床  
样本编号

查看临床  
样本编号

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

周期/组别	检测类型	正份（套）	备份（套）	采血点	受试者编号	生成临床 样本编号
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	<div>导入</div>	<div>导入</div>	<div>生成</div>
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>			
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

点击弹窗

选择框

样本管理  
员界面

Excel表格

采血序号	采血时间
C1	0h
C2	1h
C3	2h
C4	5h
C5	10h
C6	20h
C7	50h
C8	100h
<div>导入 确认 取消</div>	

临床机构/分中心序号 (下拉框选择)	受试者编号
01	003
01	006
02	001
02	005
03	002
03	004
<div>导入 确认 取消</div>	

新建项目

CRC-L2501

临床样本  
编号规则

生成临床  
样本编号

查看临床  
样本编号

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

周期/组别	检测类型	正份（套）	备份（套）	采血序号, 时间	受试者编号
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	C1,0h <input type="checkbox"/>	001 <input type="checkbox"/>
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>	C2,1h <input type="checkbox"/>	002 <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

点击弹窗

查看

## 样本管理 员界面

临床样本编号

申办者

申办者项目编号

临床试验研究室项目编号

样本编号

样本编号


样本编号

样本编号

L75283CHH004-01-001-  
PK-2h-A-a1

自动列出所选样本编号

L75283CHH004-01-001-PK-2h-80mg-A1	
-----------------------------------	--

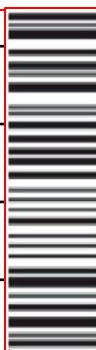

或在清单中选择  
需要打印的编号

点击打印选择打  
印清单/标签

选择单个样本编号，点击编辑可修改样本编号，但需输入理由及用户名密码

编辑

全选

打印

新建项目

CRC-L2501

临床样本  
编号规则

生成临床  
样本编号

查看临床  
样本编号

稳定性及  
质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

样本类别	代码	数量	起始编号	生成样本编号
STB <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>	20	31	<div>生成</div>

样本类别	代码	数量	起始编号	查看
STB <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/>	20	31	<div>查看</div>

样本编号规则：

STB-L-31, STB-L-32, STB-L-33, STB-L-34, STB-L-35

样本类别---代码---序号

样本编号规则是  
否能固定下来？

稳定性及质控样本编号			
申办者			
申办者项目编号			
临床试验研究室项目编号			
样本编号	样本编号	样本编号	样本编号
STB-L-1			
STB-L-2			
STB-L-3			
STB-L-4			
STB-L-5			
QC-H-1			

新建项目

CRC-L2501

临床样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

临床机构/分中心	(下拉菜单选择)
检测单位/部门	(下拉菜单选择)
运输单位/部门	(下拉菜单选择)
运输方式	(下拉菜单选择)
温度记录仪编号/序列号	<div>上传</div> <div>查看</div>
样本数量	
样本状态	(下拉菜单选择)
样本编号	<div>选择</div> <div>查看</div>
快递单及其它	<div>上传</div> <div>查看</div>
保存位置	<div></div>

点击输入框，扫描冰箱码，显示存放位置

暂存会否存在不同冰箱？

点击接收完成，在冰箱台账中自动记录日期/时间，操作人

任务发送至清点入库

接收完成

样本管理  
员界面

选择样本

周期/组别	检测类型	正份（套）	备份（套）	采血点	受试者编号
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	C1,0h <input type="checkbox"/>	001 <input type="checkbox"/>
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>	C2,1h <input type="checkbox"/>	002 <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

通过勾选条件筛选出样本编号

在筛选出的样本编号中可再次选择所需样本

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	脂血		

下拉框

默认所有项目的待清单任务均在此页面

新建项目

项目编号

待清点  
临床样本

待清点稳定性  
及质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编号	样本数量	接收人	接收时间	保存位置	开始清点
1		100				<div>清点</div>
2		50				<div>清点</div>
3		200				<div>清点</div>

刷新

自动调取接受信息并填充

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	脂血		

- 扫码枪扫描样本二维码--扫到的样本变色
- 样本不匹配报错，样本缺少报错，填写理由，确认后可允许入库

- 确定冰箱层数
- 每层中架子数量
- 每个架子中盒子数量
- 每个盒子中样本数量

- 点击入库，选择样本并扫描样本盒
- 自动生成存取记录

存放位置	存入
	确认

- 点击开始清点，默认从冰箱中取出样本
- 自动生成存取记录

开始清点

入库

打印清单表

样本管理  
员界面

临床样本清单表

申办者		申办者项目编号	
临床机构/分中心		临床机构/分中心序号	
检测单位/部门		临床试验研究室项目编号	
运输单位/部门		运输方式	
样本数量		样本状态	
样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
	溶血		
	脂血		
		接收人：	接收日期/时间：
		入库人：	入库日期/时间：

1. 打印控件：导出pdf

2. Excel：可导出excel，但修改需要改代码

3. 是否有导出excel的需求？

新建项目

项目编号

待清点  
临床样本

待清点稳定性  
及质控样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编 号	样本数 量	申请人	申请人 时间	目标位 置	开始清 点
1						<div>清点</div>
2						<div>清点</div>
3						<div>清点</div>

刷新

样本编号	样本编号	样本编号	样本编号
STB-L-1			
STB-L-2			

稳定性及质控样本清单表 要不要清单？

申办者		申办者项目编号	
检测单位/部门		临床试验研究室项目编号	
样本数量			
样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
		申请人：	申请日期/时间：
		入库人：	入库日期/时间：

新建项目

CRC-L2501

领用

归还

稳定性及质控  
样本入库

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	样本类别	样本数量	申请人	申请时间	目标位置	查看
1	临床样本					<div>查看</div>
2	稳定性及 质控样本					<div>查看</div>

申请领用

实验人员  
界面

申请领用

周期/ 组别	检测 类型	正份 (套)	备份 (套)	采血 点	受试 者编 号	用途	目标 位置	暴露 温度	目标 时间
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

通过勾选条  
件筛选出样  
本编号

日期时间

下拉框选择目标位置

根据放置位置自动填  
充温度

检测类型	代码	数量	起始编号	目标位置	暴露温度	目标时间
STB <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>					
QC <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>					
	H <input type="checkbox"/>					

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	脂血		

在筛选出的样本  
编号中可再次选  
择所需样本

和上页在一个界  
面显示

- 确认样本无误后
- 点击确认， 申请发送至样本管理员

新建项目

CRC-L2501

领用

归还

稳定性及质控  
样本入库

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	样本类别	样本数量	申请人	领用时间	目标位置	归还
1	临床样本					<div>申请归还</div>
2	稳定性及 质控样本					<div>申请归还</div>

实验人员  
界面

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	脂血		

- 选择需要归还的样本，允许分批归还
- 点击确定，申请发送至样本管理员
- 归还只能归还至领出位置

全选

确定

实验人员  
界面

新建项目

CRC-L2501

领用

归还

稳定性及质控  
样本入库

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

检测单位/部门	(下拉菜单选择)
样本数量	自动生成
样本编号	<div>选择</div> <div>查看</div>
目标位置	

下拉框选择

点击申请入库，任务  
发送至样本管理员

申请入库

实验人员  
界面

申请领用

样本类别	代码	数量	起始编号	目标位置	暴露温度
STB <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>				
QC <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>				
	H <input type="checkbox"/>				

通过勾选条件筛选出样本编号

下拉框选择放置位置

根据放置位置  
自动填充温度

在筛选出的样本编号中可再次选择所需样本

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
	溶血		
	脂血		

- 确认样本无误后
- 点击确认， 申请发送至样本管理员

全选

确定

样本管理  
员界面

显示所有  
项目中的  
申请任务

新建项目

项目编号

待领用样本

待归还样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目 编号	样本 类别	样本 数量	申请 人	申请 时间	目标 位置	目标 时间	领用
1		临床 样本						领用
2		稳定性及 质控 样本						领用

样本管理  
员界面

申办者		申办者项目编号	
临床试验研究室项目编号		领用数量	
样本编号	存放位置	样本编号	存放位置

- 点击清点，默认从冰箱中取出样本
- 自动生成存取记录
- 扫描样本标签或样本盒进行清点核对，完成后点击领用完成

清点

领用完成

新建项目

项目编号

待领用样本

待归还样本

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编号	样本数量	申请人	申请时间	归还	跟踪表
1					<div>归还</div>	<div>查看</div>
2					<div>归还</div>	<div>查看</div>
3					<div>归还</div>	<div>查看</div>

样本管理  
员界面

申办者		申办者项目编号	
临床试验研究室项目编号		领用数量	
样本编号	存放位置	样本编号	存放位置
		1. 自动显示存放位置 (之前领出的位置)	
		2. 再次扫描	

- 点击存入，选择样本并扫描样本标签或样本盒
- 点击确认，自动生成存取记录
- 点击归还完成，生成跟踪表

存放位置	存入
	<div>确认</div>

存入

归还完成

样本跟踪表

申办者			申办者项目编号		
临床试验研究室项目编号			领用数量		
样本编号	用途	特殊事项	样本编号	用途	特殊事项
申请人：		领用时间：		暴露温度：	
样本管理员：		归还时间：		暴露时间：	

实验人员  
界面

新建项目

项目编号

外部转移

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

转出单位/部门	(下拉菜单选择)
目标单位/部门	(下拉菜单选择)
运输方式	(下拉菜单选择)
样本编号	<div>选择</div> <div>查看</div>
样本数量	

任务发送至样本管理员

申请转移

实验人员  
界面

选择样本

周期/组别	检测类型	正份（套）	备份（套）	采血点	受试者编号
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	C1,0h <input type="checkbox"/>	001 <input type="checkbox"/>
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>	C2,1h <input type="checkbox"/>	002 <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

通过勾选条件筛选出样本编号

在筛选出的样本编号中可再次选择所需样本

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	脂血		

下拉框

新建项目

项目编号

外部转移

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编号	样本数量	申请人	申请时间	目标位置	查看
1						<div>查看</div>
2						<div>查看</div>

转出单位/部门	
目标单位/部门	
运输方式	
样本编号	<div>清点</div>
样本数量	
样本状态	(下拉菜单选择)
温度记录仪编号/序列号	<div>上传</div> <div>查看</div>
快递单及其它	<div>上传</div> <div>查看</div>

样本管理  
员界面

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	脂血		

自动生成存取记录



开始清点

清点完成

新建项目

项目编号

外部转移

内部转移

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

转出		转入	
转出位置	(下拉选择冰箱)	目标位置	(下拉选择冰箱)
样本编号	<div>扫描</div> <div>查看</div>	样本转入	<div>扫描</div> <div>查看</div>
样本数量		样本数量	

运输方式	(下拉菜单选择)
温度记录仪编号/序列号	<div>上传</div> <div>查看</div>
样本状态	(下拉菜单选择)

- 样本转出可以冰箱，层，架，盒为单位
- 样本转入以盒为单位

- 点击开始转运，默认样本取出
- 自动记录冰箱台账

- 点击转运完成，默认样本取出
- 自动记录冰箱台账

开始转运

转移完成

实验人员  
界面

新建项目

项目编号

销毁申请

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

样本编号	<div>选择</div> <div>查看</div>
样本数量	
附件	<div>上传</div> <div>查看</div>

项目负责人发起申请--分析测试主管审批--研究室主任审批--样本管理员销毁

任务发送

申请销毁

新建项目

项目编号

样本销毁

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编号	样本数量	申请人	申请时间	审批附件	样本编号
1					<div>查看</div>	<div>查看</div>
2					<div>查看</div>	<div>查看</div>

样本管理  
员界面

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001- PK-2h-A-a1	脂血		

自动生成存取记录

生成报告

开始清点

销毁完成

## 样本管理 员界面

## 新建项目

项目编号

接收

入库

存取

## 数据统计

## 全局参数

## 项目配置

## 样本接收

清点入库

## 样本存取

## 样本转移

## 样本销毁

## 数据汇总

## 项目归档

序号	项目编号	样本数量	接收人	接受时间		查看
1						<a href="#">查看</a>
2						<a href="#">查看</a>
3						<a href="#">查看</a>

[查看](#)[查看](#)

查看

可选择项目，按项目查询

## 样本管理 员界面

可选择项目，按项目查询

新建项目

项目编号

接受

入库

存取

数据统计

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

序号	项目编号	样本数量	操作人	入库时间		查看
1						查看
2						查看
3						查看

## 样本管理员界面

## 新建项目

项目编号

接受

入库

流水  
存取

## 数据统计

## 全局参数

## 项目配置

## 样本接收

清点入库

## 样本存取

## 样本转移

## 样本销毁

## 数据汇总

项目归档

[illegible]

可选择项目，按项目查询

样本存取记录流水

序号	日期	时间	样本编号	保存位置	存入/取出	用途	操作人	备注
1			L75283CH H004-01- 001-PK- 2h-A-a1					
2			L75283CH H004-01- 001-PK- 2h-A-a1					
3								

样本管理  
员界面

可选择项目，按项目查询

新建项目

项目编号

接受

入库

存取

数据统计

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

项目归档

样本编号	用途	取出时长	取出次数
	ISR		
	重测		

可设置报警线，超出提示

样本编号	用途	样本类型
<div>选择</div>	ISR <input type="checkbox"/> 重测 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	STB <input type="checkbox"/> QC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

通过勾选条件筛选出样本编号

样本编号	取出次数	取出时长总计	重测次数
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1			
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1			

确定

可视化样本查询

冰箱列表
CLAB-FR-01

A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4

A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6


样本编号	保存位置	转移情况	存取次数	取出时长总计	重测次数

实验人员  
界面

新建项目

项目编号

样本归档

项目归档

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

样本及项目归档

序号	样本数量	申请人	申请时间	查看
1				<div>查看</div>
2				<div>查看</div>

归档申请

实验人员  
界面

申请归档

周期/ 组别	检测 类型	正份 (套)	备份 (套)	采血 点	受试 者编 号	用途	目标 位置	暴露 温度	目标 时间
A <input type="checkbox"/>	pk <input type="checkbox"/>	a1 <input type="checkbox"/>	b1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
B <input type="checkbox"/>	ADA <input type="checkbox"/>	a2 <input type="checkbox"/>	b2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C <input type="checkbox"/>	CT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
E <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
F <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

通过勾选条  
件筛选出样  
本编号

日期时间

下拉框选择目标位置

根据放置位置自动填  
充温度

申请领用

样本编号	特殊事项	样本编号	特殊事项
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	溶血		
L75283CHH004-01-001-PK-2h-A-a1	脂血		

在筛选出的样本  
编号中可再次选  
择所需样本

和上页在一个界  
面显示

- 确认样本无误后
- 点击确认， 申请发送至样本管理员

实验人员  
界面

新建项目

项目编号

样本归档

项目归档

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

样本及项目归档

归档申请

样本管理  
员界面

新建项目

项目编号

样本归档

项目归档

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

样本及项目归档

序号	项目编号	申请人	申请时间	查看
1				<div>查看</div>
2				<div>查看</div>

归档申请

转出		转入	
转出位置	(下拉选择冰箱)	目标位置	(下拉选择冰箱)
样本编号	<div>扫描</div> <div>查看</div>	样本转入	<div>扫描</div> <div>查看</div>
样本数量		样本数量	

运输方式	(下拉菜单选择)
温度记录仪编号/序列号	<div>上传</div> <div>查看</div>
样本状态	(下拉菜单选择)

样本管理  
员界面

新建项目

项目编号

样本归档

项目归档

全局参数

项目配置

样本接收

清点入库

样本存取

样本转移

样本销毁

数据汇总

样本及项目归档

序号	项目编号	申请人	申请时间	归档
1				<div>确认</div>
2				<div>确认</div>